



1. General: Aparato de inmersión eléctrico

1.1. Artículo: Dippy pro digital 230V Art.-Nr.: 405-1000
Dippy pro digital 115V Art.-Nr.: 405-1115

1.2. Forma de suministro: - 1 Dippy pro digital
- el tanque contiene cera de inmersión DUO DIP Art.-Nr. 741-0000 color naranja

1.3. Dirección del fabricante: YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen, Alemania
Tel.: 07733-9410-0 FAX: 07733-9410-22
www.yeti-dental.com info@yeti-dental.com www.dentalwax.com

1.4. Anotaciones de la marca depositada: DGBM 9403622.5

1.5. Características de potencialidad:

tensión de red:	230V +/- 10%	I 115V
frecuencia:	AC 50Hz/90Hz	I AC 50/60Hz
conexión/enchufe:	Schuko / aleman	I US Schuko
potencia absorbida:	35/38VA	I 35/38VA
fusible:	400mA	I 400mA
protección de seguridad:	toma de tierra	I toma de tierra

1.6. Condiciones para la colocación o depósito:

- colocar horizontal, seguro y que no resbale
- depósito seco a temperatura de ambiente
- proteger ante contacto con ácidos y lejía

2. Modo de empleo:

Nuestros aparatos de inmersión DIPPY **sirven solamente para calentar cera de inmersión para la odontotécnica**. Para instrucciones detalladas vean nº 4. **No usar jamás en el paciente. En el caso de utilización contra estas normas no asumimos ninguna garantía o responsabilidad por eventuales daños.**

3. Riesgos y peligros durante el uso:

1. Asegurese que personas indebidas (por ejemplo niños) tengan contacto con el aparato que debe de ser utilizado solamente por odontotécnicos o personal instruido autorizado. Antes de poner en uso leer atentamente las instrucciones de uso. En caso de preguntas o dudas contacte a su distribuidor o fabricante.
2. Usar el aparato solamente en lugares de trabajo secos; limpiar solo en seco y no meter jamás en recipientes con agua.
3. No tapar las ranuras de aire.
4. Cualquier modificación del aparato pasa a responsabilidad propia.
5. El aparato solamente puede ser abierto por personal calificado.
6. Utilizar solamente piezas de repuesto indicadas por el fabricante. En caso contrario **pierde la garantía y no asumimos ninguna responsabilidad.**
7. Antes de cualquier intervento o apertura del aparato quitar el enchufe de la red.
8. No desenchufar tirando del cable.
9. Para la limpieza del aparato no usar disolventes.
10. El tanque debe de ser rellenado solo con cera de inmersión empleada en la odontotécnica.
11. Posicionar el aparato solo en lugares seguros y sobre superficies estables. Asegurarse de que no resbale para evitar el riesgo de quemaduras
12. En caso de envío (por ejemplo para reparación) asegurar embalaje de modo perfecto para evitar daños de transporte.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Advertencias andtes de poner en función:

Nuestros Dippys, tanques de cera, han sido producidos según los últimos conocimientos técnicos y corresponden perfectamente a las normas de seguridad, no obstante pueden surgir **peligros en caso de uso no debido a las normas.**

- El aparato solamente puede ser usado en perfecto estado, observando de modo preciso las instrucciones de uso.
- Prestar atención a las reglas de seguridad.
- El aparato solamente puede ser usado por personas cualificadas.
- Comprobar que el aparato y sobre todo el cable de la corriente esten en estado perfecto.
- Verificar la cantidad de cera de inmersión y rellenar en caso de que sea necesario teniendo cuidado de que no se salga del tanque.

4.2. Puesta en funcionamiento:

1. Conectar a la corriente (recuerde solo a enchufes apropiados, vea punto 1.5.)
2. Enchufar el aparato. El enchufe esta en la parte trasera del aparato.
3. Seleccionar con el interruptor la indicación de temperatura actual en °C o °F.
4. Cerrar la tapa por encima del tanque.
5. Ajustar la temperatura deseada con el regulador rotativo. Después de aprox. 15 minutos el tanque y la cera estan completamente caliente y mantienen la temperatura estable. (+/- 1°C por 0,10°C indicación)
6. Para un calentamiento más rápido puede poner el regulador en la temperatura máxima y después de que la cera este líquida bajar denuevo a la temperatura necesaria. Para un enfriamiento más rápido abrir la tapa.


Cuando alcanza la temperatura para trabajar?

Visible por la luz roja LED a la derecha del aparato

Si la luz roja esta encendida permanentemente el aparato aún esta precalentando

Si la luz roja fulgura el aparato llega a la temperatura deseada

7. Una vez llegado a la temperatura deseada inmergir el muñon aislado rápidamente y sacarlo lentamente por una esquina. (Cuidado peligro de quemadura a través de la cera y del tanque de metal).
8. Después de enfriarse la cofia cortar con cuidado la sobra y sacar la cofia con cuidado: no hechar la sobra de nuevo en el tanque, ya que la cera contiene líquido aislante.
9. Si debe de rellenar el tanque con cera durante el funcionamiento repita 1. y 5.
10. Una vez acabado el trabajo diario apagar el aparato – Peligro de incendio!
11. Antes del almacenamiento del aparato dejar enfriar el aparato.
No dejar calentar demasiado la cera – peligro de incendio!
Cuidado con posibles daños de los aparatos y cables por llama abierta en el sitio de trabajo.

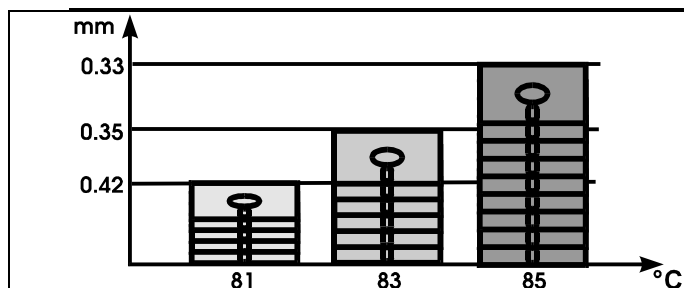

Espesuras de la cera según la temperatura usando la cera de inmersión PRECI DIP.

Temperatura ambiental = 22°C
 Temperatura del muñon = 22°C
 Peso del muñon = 4g
 Proceso de inmersión = 3 segundos
 Intervalo de medición = 15 minutos

5. Eliminación: para la eliminación del aparato seguir las normas vigentes.

En caso de devolución del aparato debe de elegir el transporte más barato e informar el fabricante sobre ello.

6. Garantía: La garantía de nuestros aparatos es de 24 meses desde la fecha de compra!
Descartados estan piezas de desgaste.

7. Piezas de recambio y accesorios:

740-1150 PRECI DIP amarilli	150g	750-0150 ELASTO DIP azul	150g
740-2150 PRECI DIP rojo	150g	750-2150 ELASTO DIP pink	150g
741-0000 Duo Dip naranja	80g	750-3150 ELASTO DIP rojo	150g
741-1000 Light Dip rosa	80g	750-4150 ELASTO DIP marrón	150g

Cera de inmersión fotopolimerizable